

Têtes fantômes frasaco P-6/3 et P-6/5 et accessoires



P-6/3 EINSATZ PRO

L'articulateur P-6/3 EINSATZ PRO permet la modification et la mise à jour des têtes fantôme existantes de la série P-6/3 en remplaçant l'articulateur P-3 standard de celles-ci. Il est une variante de l'articulateur frasaco P-3 de solide réputation, optimisé pour les besoins de la formation prothétique.

La distance inter-incisives a été augmentée de 42 mm à env. 52 mm lors du glissement des trajectoires condyliennes. Un guide incisif pour exercices avec modèles édentés est inclus. Les boîtes condyliennes ont été équipées de 2 systèmes de blocage additionnels permettant l'ajustement des condyles en position centrée de manière précise. Toutes les caractéristiques identiques à la tête P-6/3, donc les mêmes accessoires et aussi toutes les combinaisons de systèmes de fixation etc. sont possibles comme avec la P-6/3 (modèle dentaire exclu)



P-6/5

La tête fantôme P-6/5 est une unité de travail perfectionnée pour des exercices avancés correspondant à la description de P-6/3 et offrant les possibilités supplémentaires suivantes : L'inclinaison variable des trajets condyliens, réglable des deux côtés permet la simulation d'un guidage idéal de dents frontales et de canines ou une relation d'occlusion parfaitement équilibrée. Les modèles sont transférables dans des articulateurs à réglage partiel ou complet après avoir reporté les valeurs géométriques de base. La selle de nez modelée sur la calotte et les broches de fixation aux boîtes condyliennes permettent le montage d'arcs dentaires anatomiques et de localisateurs individuels de l'axe charnière (modèle dentaire exclu)

Les têtes fantôme frasaco sont équipées pour la fixation des modèles dentaires par vissage. Si vous préférez une fixation magnétique des modèles dentaires, il est possible d'y monter des plaques de montage magnétiques (sans surcoût). Veuillez nous en informer lors de votre commande.

P-6/5 HGB

La tête fantôme P-6/5 HGB (avec limitation du mouvement de la tête selon les degrés de liberté anatomiques) est utilisée pour toutes les unités d'exercice avec torse au lieu de la tête fantôme P-6/5.



P-6 GMN

Le nouveau masque facial P-6 GMN est le nouveau standard pour les têtes de fantôme frasaco; il remplace la version précédente P-6 GM. Il combine le matériau résistant bien connu avec une forme de bouche réaliste mais légèrement plus large qu'avant.



P-6 GL


Le masque facial P-6 GL présente une ouverture de bouche plus grande dans le sens vertical car cela est nécessaire, par exemple, pour les simulateurs de type DentSim.

P-G

Le masque facial P-G représentant une ouverture de bouche plus large et un menton rallongé a été conçu spécialement pour les têtes fantôme P-6/3 PRO, ainsi que l'usage avec le tuyau d'évacuation de l'eau intégré du type P-G IWS. Les modifications apportées réduisent les forces de traction dans la région buccale du masque.

Accessoires pour têtes fantômes frasaco

P-6 W Raccord de vidange pour masque facial.
Les positions pour les raccords de vidange sont marqués à l'intérieur du masque et sont simplement à perforer.

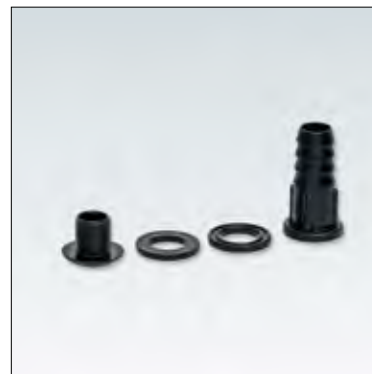

P-6 SL Tuyau flexible d'évacuation de l'eau (1,20 m)

P-6 K Raccord rapide pour tuyau d'eau (tuyau P-6 SK 0,12 m inclus)

P-6 H Fixation de la bouteille collectrice d'eau

P-6 F Bouteille collectrice d'eau



P-6 GMN1L Masque facial de la série P-6 GMN avec orifice à l'arrière dans la partie inférieure et destiné à la connexion d'un système simple d'évacuation des fluides.

Dans ce cas, la connexion se fait à l'aide d'un raccord de vidange P-6 W inclus un tuyau P-6 SL, d'un raccord rapide P-6 K avec un tuyau P-6 SK et un réservoir collecteur d'eau P-6 F, fixé au poste de travail à l'aide d'un support P-6 H.



P-6 GMN2L Masque facial de la série P-6 GMN avec deux orifices à l'arrière dans la partie supérieure pour la connexion d'un système double d'évacuation des fluides.

Dans ce cas, la connexion se fait à l'aide de deux raccords de vidange P-6 W, 2 tuyaux P-6 SK, une raccord en Y no. 1585, un tuyau P-6 SL, un raccord rapide P-6 K avec un autre tuyau P-6 SK et un réservoir collecteur P-6 F, fixé au poste de travail à l'aide d'un support P-6 H. L'avantage de ce système un peu plus complexe permet une meilleure évacuation des eaux de spray en position de traitement normale, tandis que le dispositif décrit au paragraphe P-6 GMN1L oblige à relever la tête fantôme à plusieurs reprises lors du travail pour permettre l'évacuation de l'eau au point le plus bas.



P-G IW Masque facial de la série P-G avec tuyau d'évacuation intégré à l'intérieur dans la cavité buccale de la tête fantôme, pour être connecté à un dispositif d'aspiration existant au poste de travail.

P-G IWS Kit de tuyau d'évacuation pour masque facial comme avant pour commandes répétées et remise à nouveau du masque facial P-G au masque facial P-G IW.

