

Modèles de travail pour l'odontologie pédiatrique

AK-6/2 Modèle à denture mixte avec 20 dents de lait et 4 molaires permanentes. Réalisé en matière synthétique dure avec gencives élastiques échangeables. Dents antérieures mandibulaires à encastrer, toutes les autres dents sont vissées. Dispositifs d'échange rapide pour l'adaption à la plaque de fixation rapide.

AK-6/2 M Modèle à denture lactéale comme AK-6/2, mais avec 20 dents de lait seulement. **Nota bene : Ces modèles pédodontiques ont besoin, pour leur utilisation sur tête fantôme frasaco, des plaques AK-SRM de connexion rapide par emboîtement.**

AK-6/2 WOK Gencive élastique échangeable pour maxillaire. Elle est placée sur le maxillaire et maintenue par les dents vissées convenant au modèle AK-6/2 OK.

AK-6/2 WOKM Gencive élastique échangeable pour AK-6/2 M OK.

AK-6/2 WUK Gencive élastique échangeable pour mandibule. Elle est placée sur la mandibule et maintenue par les dents vissées convenant au modèle AK-6/2 UK.

AK-6/2 WUKM Gencive élastique échangeable pour AK-6/2 M UK.

AK-SRM Plaques de fixation pour des modèles pédiatriques AK-6/2 et AK-6 permettant la fixation par vissage ou à l'aide des plaques de montage magnétique sur les têtes fantômes.

AK-6 Modèle à denture mixte, correspondant dans une large mesure au AK-6/2. Pour faciliter les premiers travaux de préparation, cette version a un contour gingival plus bas de sorte que les dents sont plus facilement accessibles que sur le modèle AK-6/2.


AK-6 M Modèle à denture lactéale comme AK-6/2, mais avec 20 dents de lait seulement. **Nota bene : Ces modèles pédodontiques ont besoin, pour leur utilisation sur tête fantôme frasaco, des plaques de connexion rapide par emboîtement AK-SRM.**

AK-6 WOK Gencive élastique échangeable pour maxillaire. Elle est placée sur le maxillaire et maintenue par les dents vissées convenant au modèle AK-6 OK.

AK-6 WOKM Gencive élastique échangeable pour AK-6 M OK.

AK-6 WUK Gencive élastique échangeable pour mandibule. Elle est placée sur la mandibule et maintenue par les dents vissées convenant au modèle AK-6 UK.

AK-6 WUKM Gencive élastique échangeable pour AK-6 M UK.

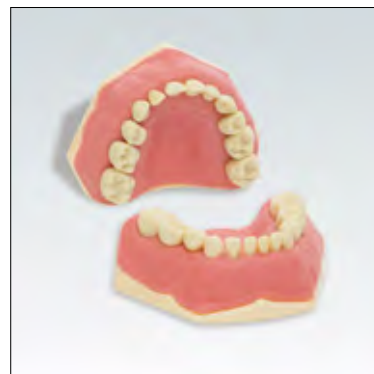

Modèles de travail pour l'odontologie pédiatrique




AK-6/2 DAK

Modèle de dents d'enfants AK-6/2 relié à l'articulateur de démonstration DAK, permettant de simples mouvements fonctionnels.

AK-6 DAK

Modèle de dents d'enfants AK-6 relié à l'articulateur de démonstration DAK, permettant de simples mouvements fonctionnels.

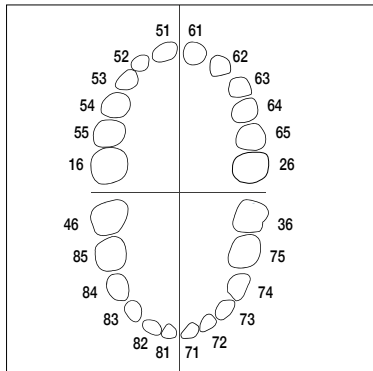


AK-6/2 Z

Jeu de 20 dents de lait et 4 molaires permanentes en matière synthétique dure avec vis, convenant au modèle AK-6/2

AK-6/2 ZE

Dents de lait et molaires permanentes individuelles avec vis, assorties sur demande

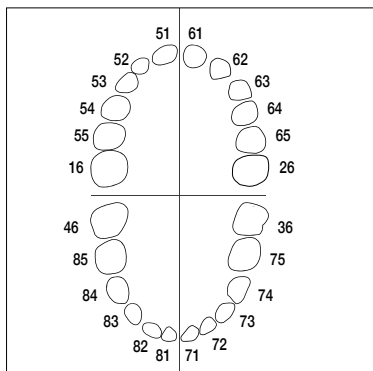

AK-6 Z

Jeu de 20 dents de lait et 4 molaires permanentes en matière synthétique dure avec vis, convenant au modèle AK-6

AK-6 ZE

Dents de lait et molaires permanentes individuelles avec vis, assorties sur demande



AK-6/2 ZP51

99-002

AK-6/2 ZP61

99-002

Traumatologie de la dent:

Les dents fracturées 51 et 61 peuvent être protégées à l'aide de couronnes strip pour dents d'enfant frasaco de la taille 512 et 611A



AK-6/2 ZP51

99-003

AK-6/2 ZP61

99-003

Carie du biberon :

Les dents 51 et 61 représentent la destruction de la substance dentaire en carie du biberon. Les dents peuvent être protégées à l'aide de couronnes strip pour dents d'enfant frasaco de la taille 512 et 611A.

Dents de modèles pour l'odontologie pédiatrique

AK-6/2 ZPU

Dents de lait à pulpe rouge en matière synthétique dure, avec vis convenant aux modèles AK-6/2 et AK-6

Si, lors de la préparation on s'approche trop à la pulpe, une teinte rouge apparaît

MS 53, 54, 55

MI 85



AK-6/2 ZPUL

Dent de modèle à chambre pulpaire vide pour des exercices de pulpotomie, avec vis, convenant aux modèles AK-6/2 et AK-6

MS 53, 54, 55

MI 85




AK-6/2 ZPUW

Dent de modèle avec chambre pulpaire remplie de cire rouge pour des exercices de pulpotomie p. ex. avec un excavateur cuillère, avec vis

Convenant au modèle AK-6/2 et AK-6

MS 53, 54, 55

MI 85

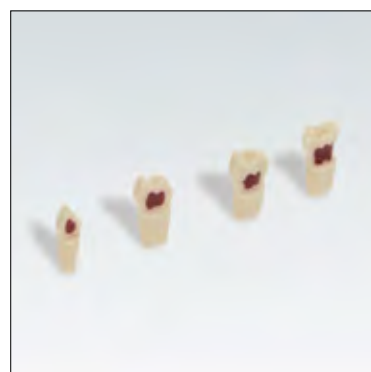


AK-6/2 ZPUWPK

Dents de lait identiques à AK-6/2 ZPUW, chambre pulpaire remplie de cire rouge, mais avec présence de lésions carieuses.

Convenant au modèle AK-6/2 et AK-6

MS 53, 54, 55

MI 85

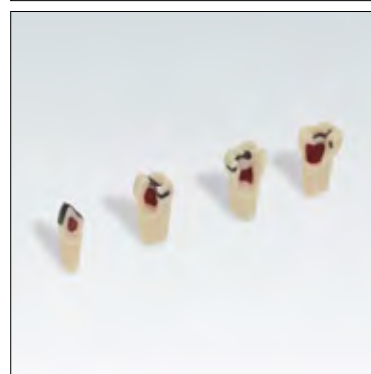

AK-6/2 ZPUF

Dents pour les exercices d'endodontie dans les dents de lait (pulpectomie) avec canal de la racine convenant au modèles AK-6/2 et AK-6 avec racine transparente et canaux de racines creux, teintés en rouge et avec couronnes dures de couleur ivoire.

MS 53, 54, 55

MI 85

