

ÉLARGISSEURS DE DENTATUS

CRÉATION DU POSTULAT PARFAIT

Le correspondance parfaite à le systèm tenons Dentatus

Les avantages


- Pour une correspondance parfaite entre la racine et les tenons de canal
- Inox de haute qualité
- Vaste choix de tailles

Les élargisseurs de Dentatus sont conçus pour créer une correspondance parfaite entre les canaux radiculaires dentaires et les formes et tailles de tenons correspondants. Ils sont fabriqués en Suède dans de l'acier chirurgical de haute qualité pour offrir des performances optimales.

Afin de garantir des performances durables

Les tailles sont indiquées par le nombre de stries visibles sur la tige.

Bords tranchants permettant de créer des emplacements parfaits pour les tenons

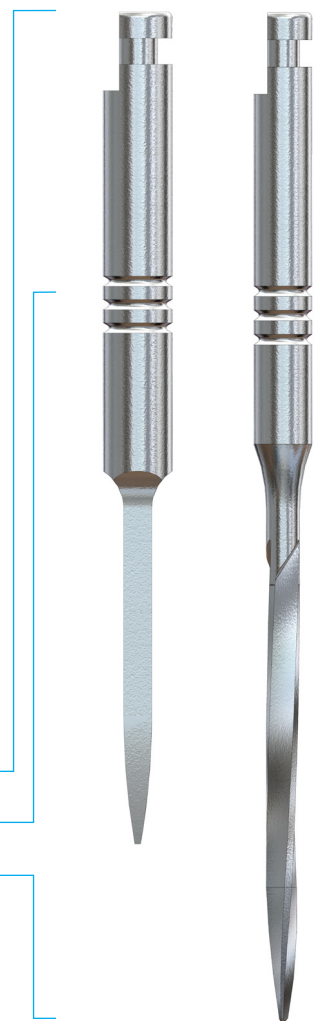

Élargisseurs Helix

Fabriqués dans de l'acier inoxydable chirurgical trempé de haute qualité, les élargisseurs Helix de Dentatus offrent une performance fiable et durable, avec une grande capacité de coupe, une coupe en douceur et un meilleur retrait des débris produits pendant la coupe.

Ils disposent de bords tranchants permettant de créer des emplacements parfaits pour les tenons de canal radiculaire de Dentatus. Les deux formes coniques et classiques des élargisseurs Helix sont disponibles, et ce avec plusieurs options de diamètre et de longueur.

Les tailles sont indiquées par le nombre de stries visibles sur la tige. Le nombre de stries correspond au même nombre de taille du tenon que sur les tenons de Dentatus.

Utilisez des élargisseurs classiques Helix pour les tenons classiques Surtex de Dentatus, les tenons Twin Luscent et Luminex et des élargisseurs coniques Helix pour les tenons Luscent.



Élargisseurs Standard

Il s'agit des élargisseurs originaux de Dentatus. Ils sont fabriqués dans le même inox de haute qualité que tous nos élargisseur, afin de garantir des performances durables.

Les tailles sont indiquées par le nombre de stries visibles sur la tige, lequel correspond au nombre de taille du tenon présent sur les tenons métalliques de Dentatus.

Utilisez des élargisseurs classiques Standard pour les tenons Surtex, Twin Luscent, Aztec et Luminex et des élargisseurs coniques Standard pour les tenons Luscent. Luminex posts, Standard Conical Reamers for Luscent.



Élargisseurs spéciaux

L'outil de guidage Dentatus Probos est utilisé pour un retrait initial et sûr du matériau d'obturation de la racine. Son embout de travail à forme transversale carrée minimise le risque de perforation des parois dentinales. Une fonction de sécurité intégrée permet à l'outil de guidage de se rompre près de la tige, s'il reste coincé dans le canal radiculaire.

L'élargisseur/routeur Dentatus Probos II a une forme de profil spéciale qui crée des indentations supplémentaires dans la paroi dentinale, lors d'un retrait latéral. Les indentations ajoutent de la surface sur la paroi dentinale afin de favoriser la fixation. Les tailles sont indiquées par le nombre de stries visibles sur la tige. Le nombre de stries correspond au même nombre de taille du tenon que sur les tenons métalliques de Dentatus.



Tenons et élargisseurs correspondants

Élargisseurs correspondant à vos tenons classiques Surtex®
HELIX CLASSIC: RSA #1-6, RSB #1-6, RSC #1-5
STANDARD CLASSIC: RUA #1-6, RUB #1-6.

Élargisseurs correspondant à vos ancrages Luscent®
HELIX CONICAL: RSG #3-6, RSH #3-6, RSI #3-5
STANDARD CONICAL: RUG #1-6, RUH #4-6.

Élargisseurs correspondant à vos ancrages Twin Luscent®
HELIX CLASSIC: RSA #3-6, RSB #3-6, RSC #3-5
STANDARD CLASSIC: RUA #3-6, RUB #3-6.

Élargisseurs correspondant à vos tenons Luminex
HELIX CLASSIC: RSA #1-6, RSB #1-6, RSC #1-5
STANDARD CLASSIC: RUA #1-6, RUB #1-6.



Dentatus AB
www.dentatus.com
SE: +46 8 546 509 00
info@dentatus.se
US: +1 212 481 1010
dentatus@dentatus.com

